



PROTOCOL PRESA DE MOSTRES TOS FERINA

Es prendrà mostra per a PCR i mostres per a cultiu.


Els professionals que prenguin la mostra han d'anar protegits amb Protector de partícules FFP3.

Els escovillons per a la presa de mostres nasofàrings es recomana que siguin flexibles. Són de dos tipus:

- Escovillons de Dacron sense medi per a la PCR
- Escovillons d'alginat càlcic amb medi de cultiu d'Amies per recollir la mostra que serà utilitzada en el cultiu

PRESA DE MOSTRES

Les mostres s'han de prendre introduint l'escovilló horitzontal a la part inferior de la fosa nasal, paral·lel al paladar, fins la paret posterior de la nasofaringe, mantenir 5 segons en aquesta posició y després treure'l. S'ha de prendre una mostra de cada fosa nasal. S'ha de tenir cura de no contaminar els escovillons.

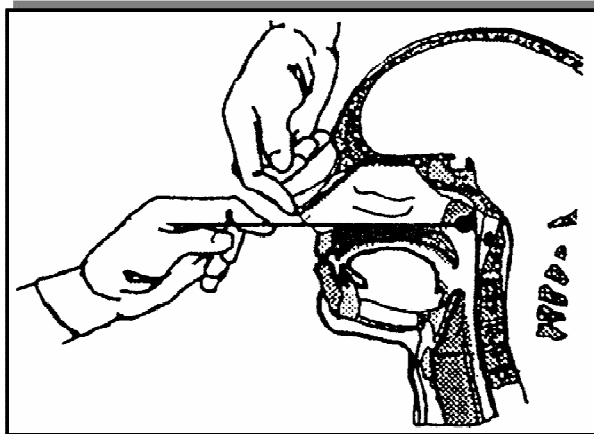

L'escovilló amb la mostra per a cultiu s'ha de ficar al tub que porta el medi de transport, el tub que conté originalment l'escovilló s'ha de llençar. L'escovilló per a PCR es torna a introduir al seu tub original.

Les mostres s'han de conservar en els tubs tancats, a temperatura ambient i han de ser correctament identificades emplenant les etiquetes.

Les mostres s'han d'enviar al laboratori en un sobre tancat, acompanyades d'un full amb les dades del pacient (nom, data de naixement i sexe), data de presa de la mostra, nom del metge, nom i adreça del centre.

Per a la tramesa de les mostres cal posar-se en contacte amb la **Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Catalunya Central (938753381/ 938726743)** si és de 8a 3 i fora d'aquest horari amb el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya 627480828.